

Ryeco zoom DSK-800 Microscope binoculaire de discussion



Zoom stéréo Ryeco DSK-800 avec zoom 1:6.3 et éclairage LED Ryf NKL12-LED

formation rapide & prix compétitif

Microscope stéréoscopique de discussion Zoom Ryeco DSK-800

Il est enfin possible de former des collaborateurs de manière optimale, rapidement et en tenant compte des coûts, à un prix raisonnable.

Avec ce microscope stéréo de discussion à zoom de haute qualité, deux personnes voient simultanément une image stéréo à l'endroit et à l'envers.

Ryeco zoom DSK-800 Microscope binoculaire de discussion



Microscope stéréoscopique de discussion Ryeco Zoom DSK-800:

Il est enfin possible de former des collaborateurs de manière optimale, rapidement et à un prix raisonnable.

Avec ce microscope stéréoscopique de discussion de haute qualité, deux personnes voient simultanément une image stéréo à l'endroit et à l'envers. Le Ryeco DSK 800 offre des grossissements de 8x à 50x (en option 6x - 38x / 4x - 25x) selon l'objectif.

L'équipement de base du microscope stéréo à zoom modulaire comprend:

- Grande plaque de base solide en acier moulé avec colonne en acier rectifié et boîte de commande (commande grossière)
- Tube de discussion avec support optique modulaire
- Corps du zoom 1:6.3 avec grossissements progressifs de *8x-50x, 6x- 38x, 4x à 25x (selon le choix de l'objectif)
- Objectif standard Ryeco 1x avec une distance de travail de 78mm (toujours inclus dans le set)
- Deux tubes binoculaires Ergo modernes de 20° avec distance oculaire réglable
- En option, le fameux tube ergonomique Ryeco 0-35°.
- Quatre oculaires RSZ-DSK WF10x/22 avec œillères droites pour porteurs de lunettes et dioptrie à régler.
- Distance entre pupillaires de 55mm à 75mm
- Champ de vision / FOV de 55mm à 1,4mm, selon l'objectif / l'oculaire
- Pointeur lumineux LED ergonomique, mobile pour une meilleure compréhension


Accessoires : différents éclairages, objectifs, oculaires, tube de caméra, adaptateur C-mount pour caméras Ryecocam ou Zeiss



Ryeco DSK-800 avec objectif zoom et grossissements continus de : 8x à 50x / 6x-38x / 4x- 25x, selon l'objectif, commande de mise au point rapide et éclairage annulaire LED (avec Ryf RL-4b ou Ryf NKL-12-LED) :

Oculaires DSK-800:	Objectif DSK-800	Distance de travail	Champ visuel / FOV
*Standard			
10x*	1.0x*	78mm*	27,5 – 4,4mm
10x	0,75x	101mm	41,3 – 6,6mm
10x	0,5x	126mm	55,0 - 8,8mm

Ryeco zoom DSK-800 Microscope binoculaire de discussion

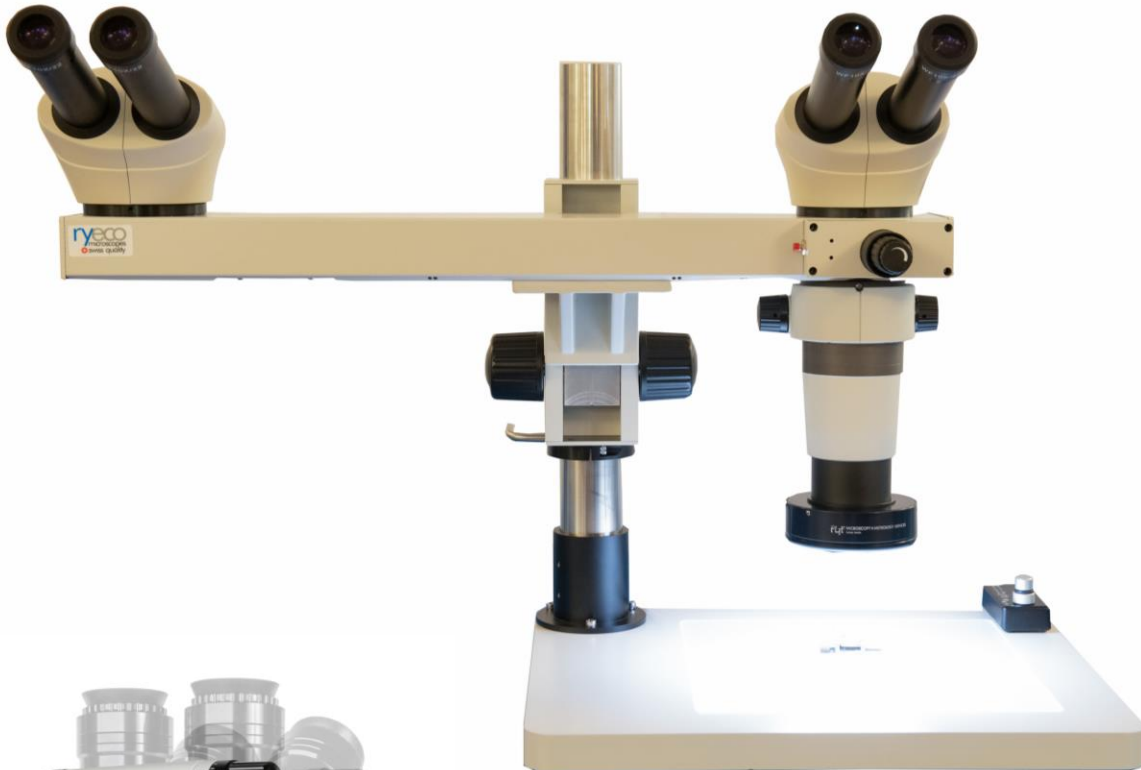

Version Ryeco P-RERGO Super-Ergo Bino-
Tilting Binokopf, 0°-180° réglable



Version Ryeco P-RERG Ergo Bino-
Tilting Binokopf, 10°-50° réglable



Ryeco Fototubus DSK800



Version Ryeco DSK800 Ergo

Ryeco zoom DSK-800 Microscope binoculaire de discussion

Ryeco RSZ-1030:

Trépied avec grand plateau et colonne avec commande de mise au point rapide, corps de zoom 1:6.3, 2x têtes bino avec angle de vision de 20°, 4 pcs. Oculaires Ryeco EWF10X/22, objectif 1x, AA= 78 mm (toujours inclus dans le set), grossissements : 8x à 50x, pont optique avec pointeur lumineux LED.

RSZ-1035:

Objectif apochromatique plan 0.5x, AA= 126 mm

RSZ-1039:

Objectif plan 0.75x, AA= 101mm (+ adaptateur)

MNB53R40:

P-RERG Ergo tête binoculaire ajustable, réglable de 10° à 50°.

MNB53R180N:

P-RERGO Ergo tête binoculaire ajustable, réglable de 0° à 180°.

RSZ-1036:

Tube camera/photo pour DSK-800, avec tube de ø23.2 mm

RSZ-1037:

Adaptateur C-Mount 0,4x

RSZ-1038:

Adaptateur monture C 1x



www.ryfag.ch



After Sales Service & Sales Staff